

■ データの取り込み方法について

必要なもの

本体に含まれるもの

本体
 検出器
 充電・通信器(黒色ボックス)
 ソフトウェアCD-ROM
 取り扱い説明書

お客様にてご用意が必要なもの

PC (Windows OS)
 USBケーブル (オス- オス)

- 1 ディスプレイの測定画面にて
2. MENU ボタンを押します。

- 2 Main Menu 画面で、10.
Systemを選択します。

- 3 System 画面で、
2.Memory を選択します。

1. ON を選択し、アイコンが
Enable '有効' となります。
 (図2 参照)
 Enable の表示で 2. OK を
 選択します。

データログを中止する場合は
 3. OFFを選択します。
 アイコンがDisable '無効'
 となります。

- 4 System 画面で、
2.Communication を選択します。

1. ON を選択し、表示が
Enable '有効' となります。

Enable の表示で 2. OK を
 選択します。

- 5 本体内にデータログを開始します。最大1000カウント(cps, uSv/h)の値が記録されます。
 1000カウントを超える場合は、最新の値が記録に残ります。

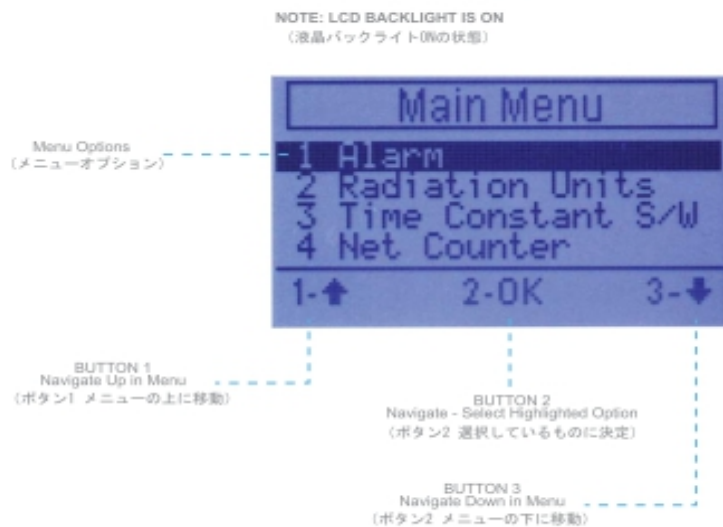


図1. Main Menu の初期画面

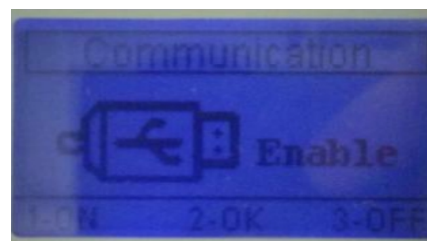


図2. 2. Communicationの画面 'Enable' の状態

AustralRAD mini データの取り込み方法

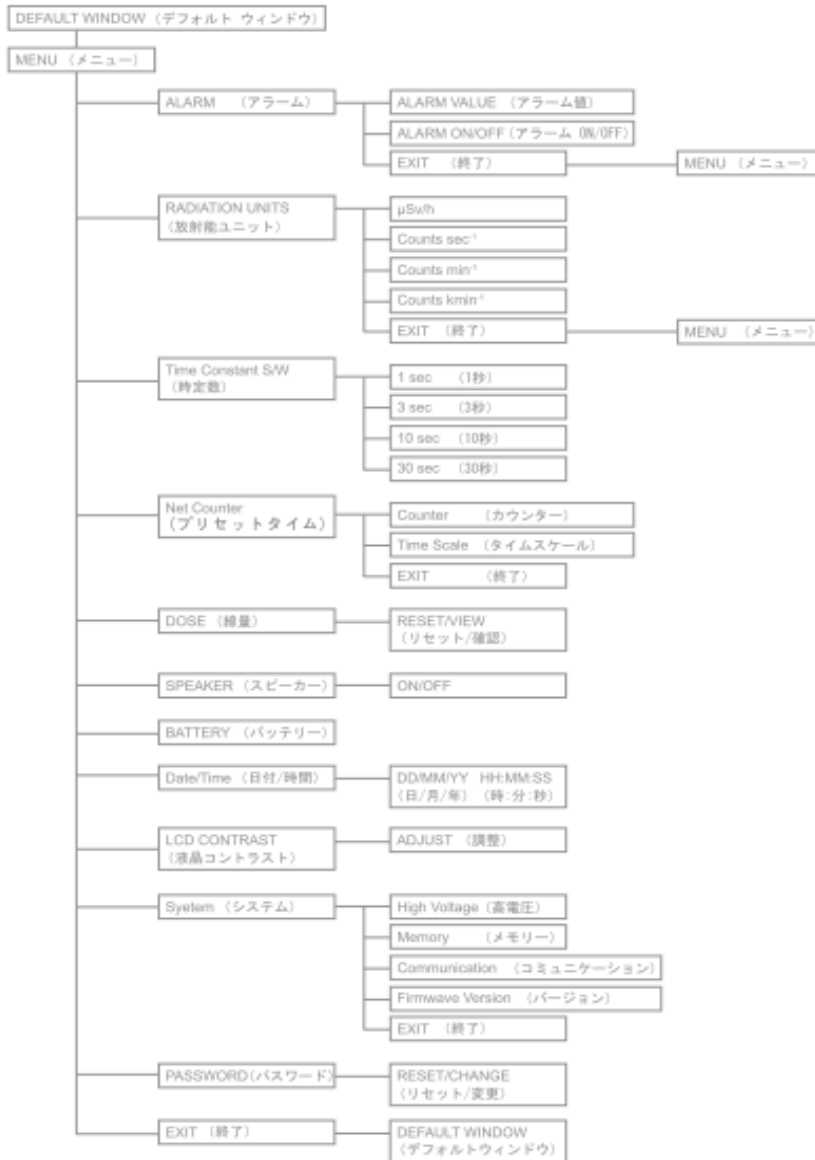


図3. Menu 画面のフローチャート

AustralRAD mini データの取り込み方法

6 ソフトウェアとの接続準備


- '6-1 本体(表示部)に充電・通信コネクタを差込んで、ネジで固定します。
- '6-2 充電・通信機(黒色のボックス)にACアダプタを差しこみ、AC100V電源コンセントに接続します。




- '6-3 PCに、付属のソフトウェアCDに含まれるソフトウェア "SetupAustralRADMini..msi" を選択し、インストールします。
- '6-4 別のフォルダ"USB Dongle Driver" に含まれる "CDM 20600.exe"をダブルクリックし、インストールします。黒い画面が現れ、自動的にインストールが行われます。
- '6-5 充電・通信機のUSBポートと、WindowsOSのPCを接続してください。(Windows PC, USBケーブル オス-オス)は市販品をご用意下さい。
- '6-6 インストールされたソフト AustralRAD Mini のアイコンをダブルクリックし、起動してください。
- '6-7 AustralRAD Mini のバージョンを示すウインドウで、OK をクリックしてください。
- '6-8 ポートの選択画面で、COM 1以外の数字 例 COM 3 を選択し OK をクリックして下さい。
- '6-9 以下が計測画面となります。USB状態マークが緑色になっていれば通信が出来る状態です。

AustralRAD mini データの取り込み方法

'6-10 データ転送アイコンをクリックして下さい。

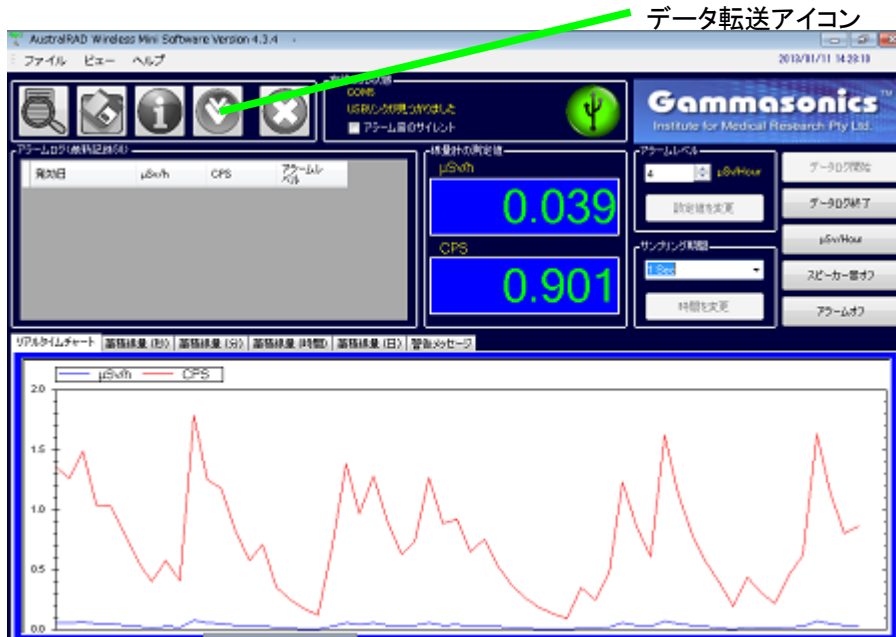

'6-11 ウィンドウにて、“AustralRAD データをダウンロード”をクリックします。

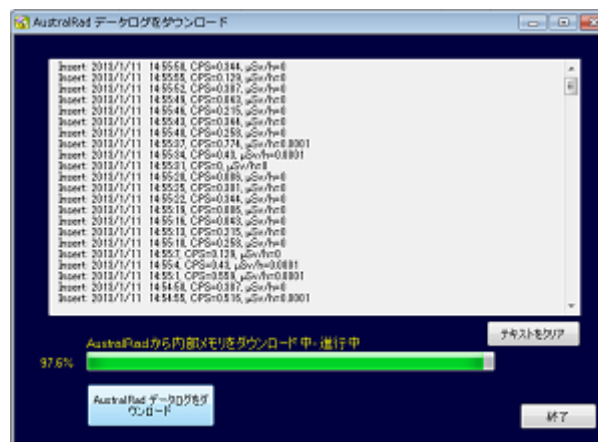

'6-12 ダウンロードされたデータは、検索アイコンをクリックすることで、過去にさかのぼってダウンロードデータの検索が可能です。