

フンケ・ゲルベル社製造の氷点測定器
1000回測定により、正確で安定信頼性のある値を判定

**FUNKE
GERBER**

CryoStar I

OSK50GH7150

- 自動氷点測定器
- 単一試料搭載測定器
- DIN/ISO/IDF 5764標準法
- 大きなタッチスクリーン
- 新しい冷却システム
- 使いやすく、高速、正確、堅牢



CryoStar I

クリオスターは迅速に氷点を測定し、信頼性の高い値を判定します。


**FUNKE
GERBER**

仕様：

- **自由度の高い設計：**
定時測定、安定点最大点の検索機能。
項目を自由設定、設定保存。国内標準規格に準拠。
- **簡易操作：**
英語メニュー画面による簡単操作。
- **確かな性能：**
高性能冷却機能により、高温環境（最高気温34℃）でも迅速測定可能。
- **迅速測定：**
40サンプル/1H 迅速測定可能。
- **インターフェイス：**
パラレル接続によりプリンタ接続可能。
シリアルインターフェイスでPC接続可能。
装置操作ソフトは内蔵。
- **小型で扱いやすい：**
小型・軽量・扱いやすい。
加水量(%)表示・印刷可能。
自動校正機能。設定項目・校正値は非揮発性メモリー保存。

技術情報：

・電源	230V/115 V AC (50...60 Hz), 180 VA
・測定分析単位	0,0001℃ (0,1 m℃)
・再現性	± 0,0020℃ (± 2,0 m℃)
・測定範囲	0,0000℃ to -1,5000℃
・試料量	2,0 ml to 2,5 ml
・測定速度	最大 40/1h 通常 30/1h
・インターフェイス	2 x シリアル 2xUSB 有線LAN
・冷却時間	約15分
・表示	約氷点曲線がグラフィックカラー表示 測定値℃、加水%、日付、時間、 測定条件
・プリンター	測定値℃、加水%、日付、時間、 測定条件

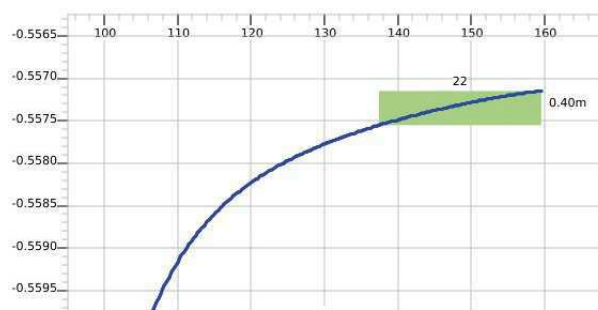

重要：

氷結カーブは測定中に画面に表示されます。
DIN/ISO/IDF5764基準による安定検索が専門的に
管理され再現されます。

Ordering Data/Name	Dimensions (W x D x H)	Weight (net)	Art. No.
CryoStar I	34 x 33 x 29 cm	8,7 kg	7150

Accessories/Name	Art. No.	Accessories/Name	Art. No.	Accessories/Name	Art. No.
熱転写プリンター	7151	校正標準液A (0,000℃)	7165	校正標準液C (-0,512℃)	7188
交換用サーミスタ	7172	校正標準液A (-0,408℃)	7186	自動ピペット、 2ml	7174
サンプルガラス瓶 50本	7167	校正標準液B (-0,557℃)	7166	ピペットチップ (交換用)	7175
冷却バス溶液 500ml	7169	校正標準液B (-0,600℃)	7187	急速凍結チューブ	7167-A

**FUNKE
GERBER**

オガワ精機株式会社 高田馬場支店
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-10-11
TEL: 03-6908-5257, FAX: 03-6908-5258
Email: sales@ogawaseiki.jpn.org